


## KESKEISET VAIHEET

### Infuusiosetin valmistelu-/letkuntäyttöprosessi

Mahdollisen liiallisen insuliinin annostelun välttämiseksi pian infuusiosetin vaihtamisen jälkeen

On erittäin tärkeää suorittaa seuraavat alla olevat vaiheet, jotta nestettä ei pääse infuusiosetin kalvolle valmistelu-/letkuntäyttöprosessin aikana:


- Säiliön täyttämisen jälkeen varmista, että insuliinipullo pysyy pystyasennossa irrottaessasi säiliötä sinisestä siirtosuojuksesta. Tämä estää insuliinia pääsemästä vahingossa säiliön päälle, josta se voisi siirtyä infuusiosetin kalvolle.

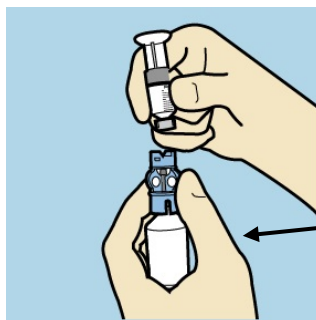

**Pullo pystyasennossa**

*Pidä insuliinipulloa pystyasennossa irrottaessasi säiliötä.*

- Jos nestettä (kuten insuliinia, isopropyylialkoholia tai vettä) pääsee säiliön päälle tai säiliön liittimen sisälle, se voi tukkia infuusiosetin kalvon. Tämä voi lisätä painetta pumpun säiliölokerossa valmistelu-/letkuntäyttöprosessin aikana. Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa liiallisen insuliinin annostelun pian infuusiosetin vaihdon jälkeen. Jos nestettä näkyy säiliön päällä tai letkun sisällä, aloita alusta uudella säiliöllä ja infuusiosetillä.

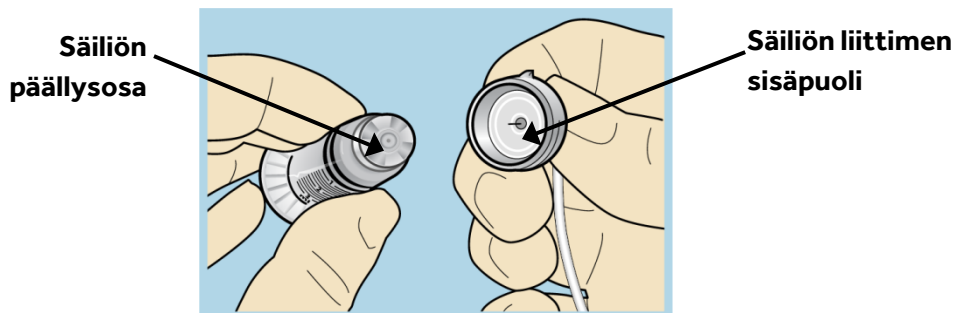

**Säiliön  
päällysosa**

**Säiliön liittimen  
sisäpuoli**

*Varmista, että nämä ovat kuivia ennen liittämistä*

**Jos havaitset mitä tahansa poikkeavaa valmistelu-/letkuntäyttöprosessin jälkeen, kuten insuliinin jatkuvaa tippumista tai purskahduksia infuusiosetin kanyylista, älä aseta settiä paikoilleen. Aloita alusta uuden säiliön ja infuusiosetin kanssa.**

**Parhaimmat käytännöt infuusiosetin vaihtamiseen:**

- Älä vaihda infuusiosettiä ennen nukkumaanmenoa, jotta pystyt seuraamaan sokeritasoasi.
- Ylimääräisenä varotoimenpiteenä tarkista verensokerisi 1 tunti infuusiosetin vaihdon jälkeen normaalin seurannan lisäksi.

Näitä käytäntöjä noudattamalla voit tunnistaa mahdollisen hypoglykemian ja hyperglykemian, jolloin voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.